

これからは 検便の厄介な作業とは おさらばしましょう

FLUSH SHEET (フラッシュシート) は簡単3ステップでご使用いただけます。

1. トイレにシートを浮かべ、
2. シートの上に排便後採便し、
3. シートごとトイレに流して終わりです。

この画期的な採便ツール「FLUSH SHEET」でストレスなく検査ができ、
みなさまが健康な毎日を送っていただけると信じております。



FLUSH SHEET

検便は日常では行わない作業のため、とても面倒な作業だと感じたことはありませんか。

健康診断で検便を義務付ける自治体（区や町や学校）も多く、

食品関連企業や飲食店の従業員様も月1回の検便提出が義務付けられています。

人間ドッグや一般の健康診断では2日に分けて検便しないといけない手間も増えています。

しかし洋式トイレでの便の採取は大変な作業です。

現状検使用シートが付属されていない検便キットや、

付属されていても1枚の薄いシートでトイレの水に浮かべても直ぐ沈んでしまい、便が取れないこともあります。

また新聞紙を使用して検便した場合、その新聞紙は一般ゴミに分別が必要です。


そんな検便の煩わしさを解消できるツールが「FLUSH SHEET」です。



FLUSH SHEETの特長

水に浮くシート	トイレの水に浮かべることで簡単に採便。
高い保持力	「水溶紙 / 水溶性プラスチックフィルム / 水溶紙」の3層構造で保持力も優れています。 また3層の間に空気が含まれるため、トイレの水にシートを浮かべて排便をしても数分浮かべることを可能にしています。
トイレに流せる	土壌・環境汚染を防ぐ生分解素材で水に溶けるため、採便後そのままトイレに流せて衛生的。(JIS基準クリア)

ご使用方法

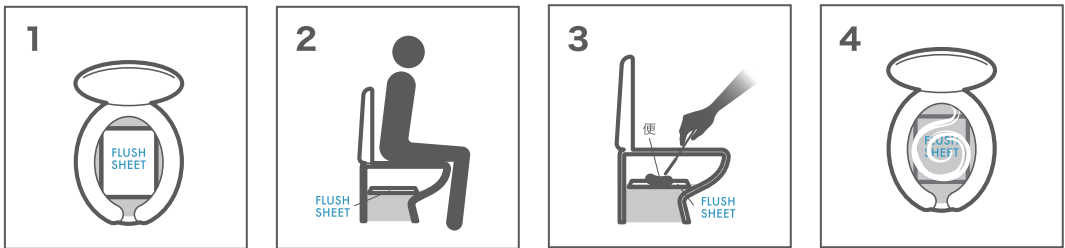

フラッシュシートを水たまりへ軽く浮かせて下さい。

フラッシュシートの上に排便します。

便が浮いている状態で採便します。

そのまま水に流して下さい。

従来の検便との比較

採便シートなしでの検便	従来の採便シートでの検便	FLUSH SHEET での検便
・洋式トイレの水たまりを避けて排便する体制に苦勞します。便秘気味の方は勿論、ほとんどの方はスムーズに排便できなくなります。 ・指導通りトイレに普段と逆向きに座ったり(違和感)、事前にトイレットペーパーで傾斜部に土手(堤防)をつくったりと個人ベースでは苦勞しています。(普通は口外しない) ・便を水たまりに落とさないよう気を使うので、便が斜面からずり落ちる前に、慌てながら採便作業を行います。 ・便が水たまりに浸かってしまい、便の採取が出来ない事が多々あります。 ・和式トイレは今では10%をきり、大変少なくなっているほとんどが洋式の水洗トイレです。	・便の保持力が無く、すぐに便が紙の採便シートを突き破り水たまりに落下してしまいます。 ・紙の採便シートの下にトイレットペーパーを何枚も敷き詰めて排便すると、今度は配管詰まりで水が流せなくなる問題もよく発生しています。	・洋式トイレの水溜りにフラッシュシートを敷き、そこへ排便しても5分間程度便は沈まずに保持されます。その間に採便します。 ・便採取後のフラッシュシートは便と一緒に流せます。 ・水溶紙 / 水溶性プラスチックフィルム / 水溶紙の3層構造で便をしっかり保持します。 ・2層の空気層があり、浮袋効果で水に浮き易いです。 ・普段と同じ姿勢で排便できます。

種類別 FLUSH SHEET のご紹介

平版

平版のフラッシュシートです。

商品サイズ: 約300mm×約300mm
素材: 水溶紙、水溶性プラスチックフィルム
日本製

商品コード	商品名	入り数
20-5010	検使用フラッシュシート	10枚
20-5100	検使用フラッシュシート	100枚



4つ折り

コンパクトな4つ折りのフラッシュシートです。

商品サイズ: 約300mm×約300mm
素材: 水溶紙、水溶性プラスチックフィルム
日本製

商品コード	商品名	入り数
20-3010	4つ折フラッシュシート	10枚
20-3100	4つ折フラッシュシート	100枚



個別包装

1枚ずつ包装してあるため誤って水に濡れても溶けず、携帯しやすい個別包装のフラッシュシートです。

商品サイズ: 約300mm×約300mm
素材: 水溶紙、水溶性プラスチックフィルム
日本製

商品コード	商品名	入り数
20-4010	個別包装フラッシュシート	10枚
20-4100	個別包装フラッシュシート	100枚

