

高齢者や身体の不自由な方にやさしく、 妊産婦の方にも配慮した採尿具

ウロキャッチII・ピー・ポールIIは採尿が
簡単、移送にも便利です。
他人に尿を見られることもなく、臭いの拡散も防止できます。
また3Lまで採尿できる箱型の検診用蓄尿セットもございます。
用途に合わせてお選びください。

選べる採尿具

「ウロキャッチII」「ピー・ポールII」「検診用蓄尿セット（蓄尿BOX 3L）」
「健診用採尿セット」の4種類あり、
どの採尿具も密閉性が高く、他人に尿を見られる心配はございません。
検査内容に合わせてお選び下さい。



ウロキャッチ II



特長

- 尿沈渣検体のずり落ち抑制(SS:Slip Save)加工
デカンテーションし易い。(特許申請済み)
- ポリ栓は密栓可能
施栓の時パチンと確認音がでるので、確実な施栓と検体の長期保存可能。
- 0.1、0.2ml及び10mlまで1ml毎に目盛表示
検体が少量の時、あわせ易い。
- 郵送にも耐えうる強度
郵送が可能。Newスピッツを推奨します。PPスピッツより更に耐圧強度が増します。
注意：万一の漏れ、破損事故防止の為、空容器のみの郵送にとどめて下さい。
- 凍結可能
-80℃(フリーザー)の凍結でも破損しません。

- ・広い採尿口を確保、尿をかけるだけで簡単に採尿できます。
- ・採尿後、専用のカバーで手を汚さず尿の移しかえができるため清潔です。
- ・専用蓋付きで匂いの拡散、異物の混入を防げます。

■仕様（総重量20g）

部品名	使用樹脂	色	サイズ（概寸・直径×長さ）
採尿器	PP系	無色	17.1～24.9×119.1mm
カバー	PE系	黄色	19.8～22.6×106mm
スピッツ	PS系	透明	4.8～17.1×106.6mm

ご使用方法



黄色のカバーを左に回転させ抜き取ります。（2重になっているので外側のカバーを外す。）



スピッツ部（透明・三角部分）を持ち、放尿中の尿に採尿口をかざし、尿を取ります。



尿を採取後、カバーを元に戻し、右に回転させしっかり締めます。



同封のラベルと袋に必要事項を記入し、ラベルをカバーに貼り採尿具を元の袋に入れ、チャックをしっかり締めて提出します。

ピー・ポール II



特長


- 液もれ防止機能付
持ち運び時に尿がこぼれることはありません。
- 尿の量がひと目でわかる
尿の量がわかり、色は感じさせないように工夫された透明感の黄色いカバーを採用しています。
- 尿が取りやすい広い採取口
採取口に尿をかけるだけなので手も汚れず清潔です。
- 採尿具は尿試験紙サイズに適合
糖・タンパク・潜血等の5項目を検査する事ができます。

- ・女性、高齢者、障害者が洋式トイレでも簡単に採取できます。
- ・コップから容器の移し替えが不要のため、朝一尿の採取及び持参尿に最適です。
- ・尿が取りやすい広い採取口で、採尿口に尿をかけるだけなので手も汚れず清潔です。
- ・尿自動分析装置に対応。
- ・自動検査機に対応可能です。

■仕様（総重量5.7g）

部品名	使用樹脂	色	サイズ（概寸・直径×長さ）
採尿器	ポリプロピレン	無色	10.2～10.5×94.0mm
キャップ	ポリプロピレン	無色	15.8～16.3×29.5mm
カバー	ポリエチレン	黄色	12.0～12.8×100mm


ご使用方法

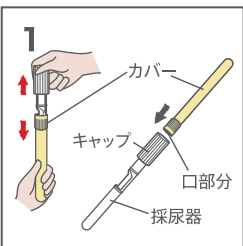


黄色のカバーをまっすぐ抜き取り、口部分をキャップの中をしっかり差し込みます。



放尿中の尿に採尿口あて、尿を取ります。

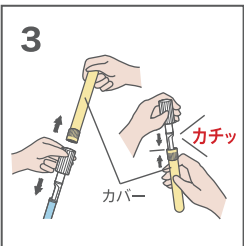

尿を採取後、黄色のカバーをもう一度抜き取り元の位置に戻します。戻す時は、カチッと音がするまでしっかり奥まで差し込んで下さい。

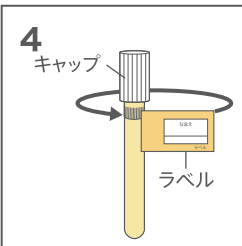

尿を採取後、ラベルをキリトリ線より切り離して銀色のテープを剥がし、巻きつけて貼って下さい。

検診用蓄尿セット（蓄尿BOX 3L）




特長

- ・尿の投入が容易な広い投入口。
- ・臭いの拡散防止と他人に尿を見られないように、蓋（つまみ付）があります。
- ・運搬が容易です。（取っ手の荷重力は9kg以上あります。）
- ・蓄尿中の個人情報の保護（蓄尿者の名前が隠せます。）に配慮しています。
- ・自宅蓄尿も簡単です。
- ・連続蓄尿時はバッグのみ交換で対応できます。

仕様

部品名	使用材料	サイズ（mm）
蓄尿箱	紙	145（W）×145（L）×180（H）
蓋	紙	155（W）×155（L）×30（H）
蓄尿袋3L	ナイロン / PE	160（W）×20+240（H）

ご使用方法

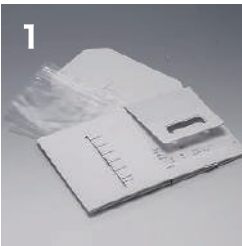

セット内容を確認し、氏名、性別、年齢、蓄尿開始日時を記入して下さい。
（セット内容：箱、蓋（紙製）、ファスナー付ポリ袋）



蓋のつまみを引き上げてセットし、四角を整え蓋の形にして下さい。



箱の内部にファスナー付袋を押し広げてセットして下さい。



フラップA、Bを包むように袋を折り返して下さい。（セット完了。蓄尿が開始できます。）蓋は必要に応じてご使用下さい。

5

24時間の蓄尿完了後は、袋のファスナーをしっかりと閉じ、尿漏れを防止して下さい。
蓄尿終了日時、尿量を記入して下さい。



フラップA、Bを蓋の隙間に差し込んでセットし、写真のように運搬して下さい。

使用上の注意

- ・本品の使用については医師、看護師等の指示に従って実施して下さい。
- ・運搬はファスナーをしっかりと閉じ、過酷な荷重をかけないようにご注意ください。
- ・箱は水漏れにご注意下さい。
- ・本品の廃棄処理は市町村の行政の指示に従って実施して下さい。（焼却可能）

健診用採尿セット



折りたたみ紙コップ または
折りたたみプラスチックコップ

特長

- ・体重をかけても割れない耐圧強度があります。
- ・ポリ栓がパチンと嵌合でき、液漏れがありません。
- ・ご希望により、スピッツはポリプロピレン製でも提供できます。
- ・ご希望により、チャック付袋は希望情報を両面印刷したものも提供できます。
- ・通常コップは折りたたみ紙コップですが、折りたたみプラスチックコップでも提供できます。

